

Balança Digital

Manual de Instruções



*Produtos com
Qualidade de Vida*

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar sua balança eletrônica

Balança Eletrônica

Sua balança pessoal eletrônica indica com precisão seu ganho ou perda de peso, e foi projetada para muitos anos de serviço, dentro das condições de uso normal.


Especificações:

- Equipada com sensor de pressão de alta precisão
- Capacidade 150 kg
- Graduação 100 gramas
- Interruptor acionado por toque do pé
- Reset automático
- Desligamento automático
- Indicador de sobrecarga

Alimentação de energia:

Bateria de Lithium incluída: 2 x CR2016 ou 1 x CR2032 ou 1 x 9V ou 1 x CR2032

Quando as baterias necessitam de substituição, a seguinte informação surgirá no visor:

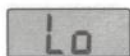

Operação:

Passo 1: Apóie a balança em uma superfície dura e plana (evite colocar sobre tapetes ou superfície macia).

Passo 2: Ligue a balança dando um toque com o pé na plataforma. Então espere alguns segundos, e surgirá no visor as seguintes informações:



(**NOTA:** Se você pisar na balança antes do visor apresentar a informação "0.0", o visor mostrará "Err". Se isto ocorrer, por favor, repita o Passo 2)



Passo 3. De forma suave, pise com os pés uniformemente sobre a balança, e mantenha-se imóvel enquanto a balança computa seu peso. Seu peso correto será exibido na tela da seguinte forma:



Desligamento automático:

Quando você sair da balança, ela desligará automaticamente. (Se você ligar a balança, mas não utilizá-la, ela também desligará automaticamente em aproximadamente 6 segundos)

Indicador de sobrecarga:

Quando a balança é sobrecarregada (acima de 150 kg), a seguinte informação surgirá no visor:



Manutenção e cuidados:

- A balança colocada em uma superfície firme e plana oferece maior precisão nos resultados.
- Procure pesar-se sempre na mesma balança, posicionada no mesmo lugar.
Superfícies irregulares podem afetar as leituras.
- Acostume-se a pesar-se sem roupa, antes das refeições e sempre na mesma hora do dia.
De manhã, após levantar, é um bom horário para controle do peso.
- Sua balança aproxima os resultados para o 0,1kg mais próximo. Caso você obtenha dois resultados diferentes, seu peso estará situado entre as duas medidas.
- Limpe sua balança com um pano levemente úmido. Não deixe que água entre na balança.
- Não use agentes químicos na limpeza.
- Não guarde sua balança na posição vertical, pois isto descarregará a bateria.
- Remova a bateria sempre que a balança for ficar sem uso por longos períodos de tempo.
- Manuseie sua balança com cuidado, não a deixe cair e não pule na plataforma.

BATERIA
LONGA VIDA

EXCLUSIVE
Sensor Disc
TECHNOLOGY

GARANTIA

Este produto tem substituição garantida se no período de 1 ano apresentar qualquer defeito de fabricação. Dirija-se ao revendedor com o produto defeituoso e a nota fiscal, e será prontamente atendido.



Serviço de Atendimento
ao Cliente:

0800.127070

(ligação gratuita)